



CZ

Návod k obsluze a údržbě

INFRAČERVENÝ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ IM201


Výrobky značky PRAKTIK dodává:

SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

web: www.solid-czech.cz

Technické specifikace:

1. Vstupní napětí: AC 230V~50Hz.
2. Maximální příkon: 13W
3. Maximální doba nepřetržitého použití: 20min.

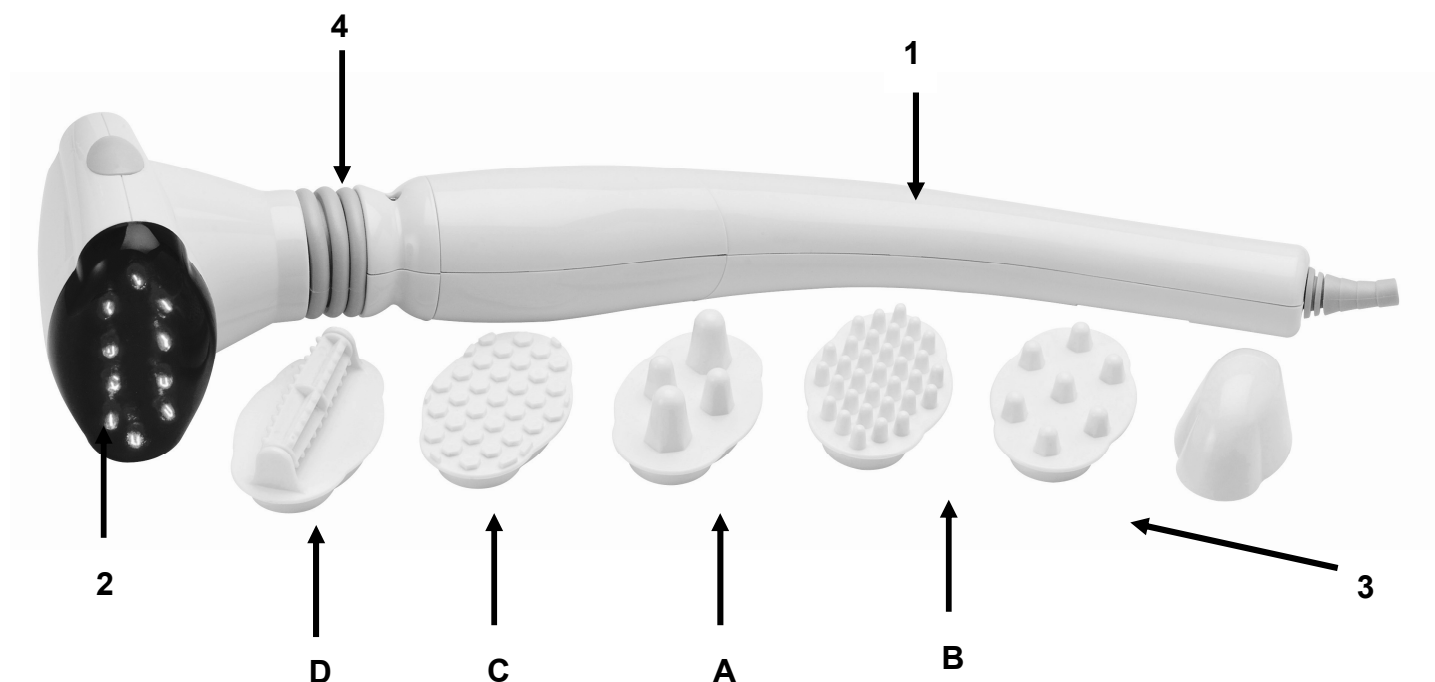

Přehled součástí

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Funkční přepínač |
| 2 | Infračervené diody LED |
| 3 | Masážní hlavice |
| 4 | Kloub |

Příslušenství

- | | |
|---|---------------------|
| A | Bodový soustředovač |
| B | Masér pokožky hlavy |
| C | Povrchový masér |
| D | Masér nohou |

Výrobek není hračka! Spotřebič není určený k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými, anebo mentálními schopnostmi, anebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich dohled neposkytuje dohled, anebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měli být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají!

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- **Před uvedením tohoto přístroje do provozu prosím pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku.**
- Tyto pokyny, záruční list, účtenku a pokud možno také obal včetně vnitřních výplní prosím uschovejte!
- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití!
- Zástrčku vytáhněte ze zásuvky vždy, když přístroj nepoužíváte, když připojujete jakékoliv součásti příslušenství, přístroj čistíte, anebo dojde-li k jakékoliv poruše. Nejdříve přístroj vypněte. Vytažení provádějte uchopením za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Abyste děti ochránili před nebezpečími spojenými s elektrickými zařízeními, nikdy je nenechávejte s přístrojem bez dozoru. Podobně při volbě vhodného místa pro svůj přístroj postupujte tak, aby děti neměly k přístroji přístup. Pečlivě zajistěte, aby kabel nevisel směrem dolů.
- Přístroj i kabel pravidelně prohlížejte, zda nejsou poškozeny. V případě jakéhokoliv poškození by přístroj neměl být používán.
- Přístroj neopravujte sami, vždy vyhledejte pomoc autorizovaného odborníka.
- Zlomený či poškozený síťový kabel lze z bezpečnostních důvodů nahradit pouze obdobným kabelem od výrobce,

našeho oddělení služby zákazníkům, či jiné osoby s obdobnou kvalifikací.

- Přístroj i kabel chraňte před teplem, přímým slunečním světlem, vlhkostí, ostrými hranami a podobně.
- Přístroj nikdy nepoužívejte bez dozoru! Přístroj vypínejte vždy, když jej nepoužíváte, a to i na krátký okamžik.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Přístroj nepoužívejte venku.
- Přístroj nesmí být za žádných okolností pokládán do vody či jiné tekutiny, ani s nimi nesmí přijít do styku. Máte-li mokré či vlhké ruce, přístroj nepoužívejte.
- Dojde-li k namočení či navlhčení přístroje, okamžitě vytáhněte elektrickou zástrčku ze sítě. Nesnažte se sahat do vody.
- Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.

Speciální bezpečnostní pokyny

- Přístroj nepoužívejte v úrovni očí ani na jiné citlivé části těla.
- Masážní přístroj byste neměli používat pod dekou ani na jiných špatně odvětraných místech.
- Před čištěním vždy odpojte síťový kabel!
- Očistěte kryt suchým hadříkem.

Použití přístroje

Elektrické připojení

- Zasuňte zástrčku do řádně instalované zásuvky 230V/50Hz.
- Masážní přístroj používejte pouze po maximální dobu 20 minut (tato doba je vyznačena na štítku – KB 20min.)
Poté nechte přístroj 15 minut vychladnout.

Funkční přepínač (1)

0 = Vypnuto

1 = Masáž

2 = Infračervené zahřívání

3 = Masáž s infračerveným zahříváním

1. Zvolte požadovaný režim pomocí funkčního přepínače (1)
2. Přístroj pracuje nejúčinněji, pokud jej používáte bez oblečení.
Před aplikací infračerveného tepla zkontrolujte teplotu hlavice.
3. Prstencem i kloubem lze otáčet (4), a vytvořit tak osobní provozní nastavení.

Masážní příslušenství

Je-li třeba, umístěte na masážní hlavici některé masážní příslušenství (3).

A: Bodový soustředovač (hluboká masáž, uvolňuje svalové napětí)

B: Masér pokožky temene hlavy (zlepšuje krevní oběh)

C: Masér určité oblasti (intenzivní masáž v případě bolestivých a napjatých svalů)

D: Masér nohou

Toto zařízení vyhovuje směrnici CE pro potlačení vysokofrekvenčního rušení a nízkonapěťovou bezpečnost, a bylo zkonstruováno tak, aby splňovalo současné požadavky na bezpečnost.

Zařízení podléhá technickým změnám bez předchozího upozornění!