



SK

Návod na obsluhu a údržbu

INFRAČERVENÝ MASÁŽNY PRÍSTROJ IM201


Výrobky značky PRAKTIK dodáva:

SOLID CZECH, a. s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

web: www.solid-czech.cz

Technické špecifikácie:

1. Vstupné napätie: AC 230 V~50 Hz
2. Maximálny príkon: 13 W
3. Maximálny čas nepretržitého použitia: 20 min.

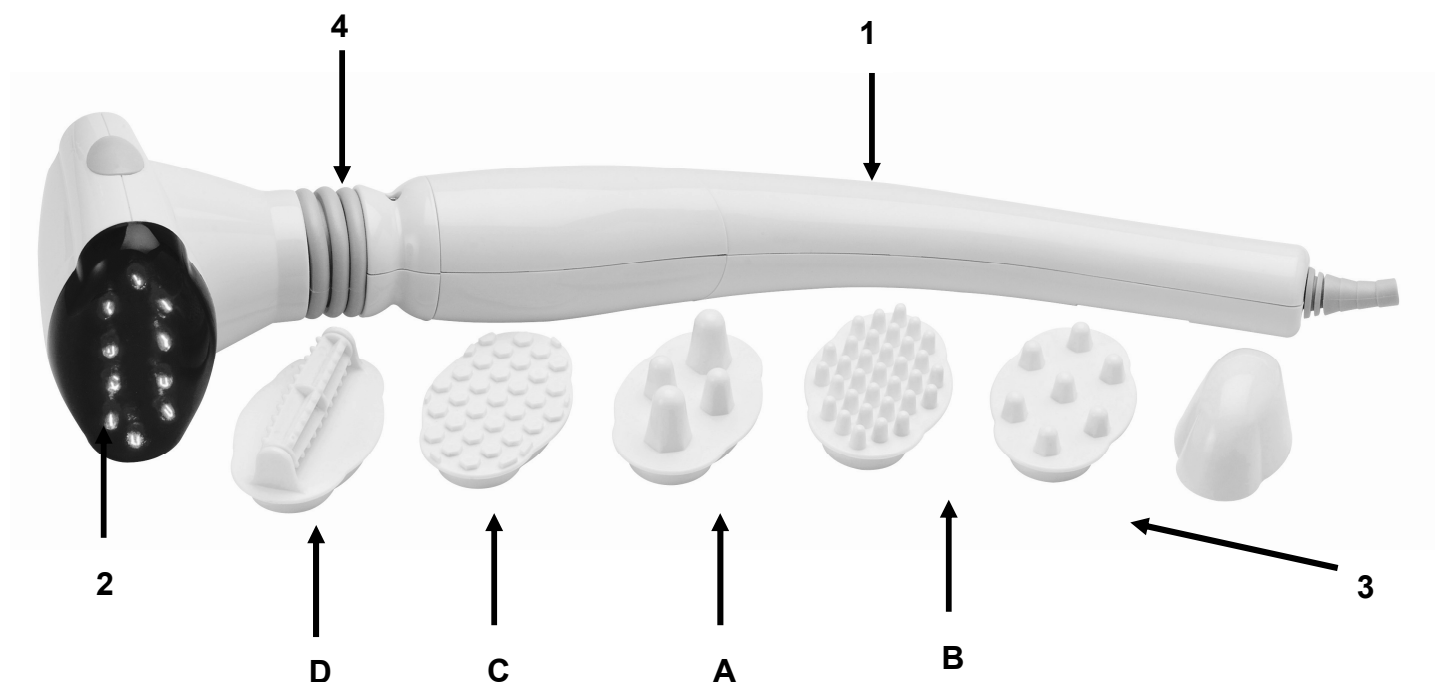

Prehľad súčastí

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Funkčný prepínač |
| 2 | Infračervené diódy LED |
| 3 | Masážne hlavice |
| 4 | Kábľ |

Príslušenstvo

- | | |
|---|---------------------|
| A | Bodový sústreďovač |
| B | Masér pokožky hlavy |
| C | Povrchový masér |
| D | Masér nôh |

Výrobok nie je hračka! Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich dohľad neposkytuje dohľad, alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nehrajú!

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- **Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, prosím, starostlivo preštudujte túto užívateľskú príručku.**
- Tieto pokyny, záručný list, účtenku a pokiaľ možno tiež obal vrátane vnútorných výplní, prosím, uschovajte!
- Zariadenie je určené výhradne na súkromné použitie!
- Zástrčku vytiahnite zo zásuvky vždy, keď prístroj nepoužívate, keď pripájate akékoľvek súčasti príslušenstva, prístroj čistíte, alebo ak dôjde k akejkoľvek poruche. Najskôr prístroj vypnite. Vytiahnutie vykonávajte uchopením za zástrčku, nie za kábel.
- Aby ste deti ochránili pred nebezpečenstvami spojenými s elektrickými zariadeniami, nikdy ich nenechávajte s prístrojom bez dozoru. Podobne pri voľbe vhodného miesta pre svoj prístroj postupujte tak, aby deti nemali k prístroju prístup. Starostlivo zaistíte, aby kábel nevisel smerom dole.
- Prístroj i kábel pravidelne prezerať, či nie sú poškodené. V prípade akéhokoľvek poškodenia by prístroj nemal byť používaný.
- Prístroj neopravujte sami, vždy vyhľadajte pomoc autorizovaného odborníka.
- Zlomený či poškodený sieťový kábel je možné z bezpečnostných dôvodov nahradiť iba obdobným káblom od výrobcu,

nášho oddelenia služby zákazníkom, či inej osoby s obdobnou kvalifikáciou.

- Prístroj i kábel chráňte pred teplom, priamym slnečným svetlom, vlhkosťou, ostrými hranami a podobne.
- Prístroj nikdy nepoužívajte bez dozoru! Prístroj vypínajte vždy, keď ho nepoužívate, a to i na krátky okamih.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Prístroj nepoužívajte vonku.
- Prístroj nesmie byť za žiadnych okolností ukladaný do vody či inej tekutiny, ani s nimi nesmie prísť do styku. Ak máte mokré či vlhké ruky, prístroj nepoužívajte.
- Ak dôjde k namočeniu či navlhčeniu prístroja, okamžite vyťahnite elektrickú zástrčku zo siete. Nesnažte sa siahť do vody.
- Prístroj používajte iba na účel, na ktorý je určený.

Špeciálne bezpečnostné pokyny

- Prístroj nepoužívajte v úrovni očí ani na inej citlivej časti tela.
- Masážny prístroj by ste nemali používať pod dekou ani na iných zle odvetraných miestach.
- Pred čistením vždy odpojte sieťový kábel!
- Očistite kryt suchou handričkou.

Použitie prístroja

Elektrické pripojenie

- Zasuňte zástrčku do riadne inštalovanej zásuvky 230 V / 50 Hz.
- Masážny prístroj používajte iba maximálne 20 minút (tento čas je vyznačený na štítku – KB 20 min.) Potom nechajte prístroj 15 minút vychladnúť.

Funkčný prepínač (1)

0 = Vypnuté

1 = Masáž

2 = Infračervené zahrievanie

3 = Masáž s infračerveným zahrievaním

1. Zvoľte požadovaný režim pomocou funkčného prepínača (1).
2. Prístroj pracuje najúčinnšie, ak ho používate bez oblečenia.
Pred aplikáciou infračerveného tepla skontrolujte teplotu hlavice.
3. Prstencom i kĺbom je možné otáčať (4), a vytvoriť tak osobné prevádzkové nastavenie.

Masážne príslušenstvo

Ak je potrebné, umiestnite na masážnu hlavicu niektoré masážne príslušenstvo (3).

- A: Bodový sústreďovač (hlboká masáž, uvoľňuje svalové napätie)
- B: Masér pokožky temena hlavy (zlepšuje krvný obeh)
- C: Masér určitej oblasti (intenzívna masáž v prípade bolestivých a napnutých svalov)
- D: Masér nôh

Toto zariadenie vyhovuje smernici CE pre potlačenie vysokofrekvenčného rušenia a nízkonapäťovú bezpečnosť, a bolo skonštruované tak, aby spĺňalo súčasné požiadavky na bezpečnosť.

Zariadenie podlieha technickým zmenám bez predchádzajúceho upozornenia!